




声波电动牙刷
Electric Toothbrush
SG-567
/
Instruction Manual
使用说明书

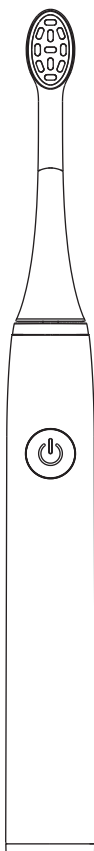

Thanks for choosing SEAGO.
Before use, please read the instructions carefully
and keep it at a safe place for future reference.


感谢选择赛嘉。使用前，
请仔细阅读说明书并妥善保管，便于日后参考。

使用说明 (CN)

安全说明

1. 首次使用电动牙刷时，有部分人群会有些不适应的情况（例如有刺激和发麻的感觉），请不要担心，这种现象一般会在两天后逐渐减弱，如仍旧感觉不适，请停止使用本产品并咨询您的牙医。
2. 请勿私自对产品进行拆卸、修理、改造等。
3. 请勿敲打或跌落本产品，如果产品有任何损坏，请勿使用。
4. 在您连接电源之前，请检查本地的电源电压是否与产品所标示的电压相符。
5. 本产品仅可使用赛嘉生产的专用牙刷刷头。
6. 如果您的口腔或牙龈在过去 2 个月内曾动过手术，或在使用本牙刷后有出血状况或出血状况延续超过一星期，请向您的牙医咨询后再使用。
7. 若您身上装有心律调整器或曾装入其他装置，请于使用前咨询您的医师或植入装置的制造商。
8. 本产品只适用于清洁牙齿、牙龈、舌头，请勿用作其他用途。
9. 请放置在婴儿和儿童接触不到的地方，不可当玩具使用。
10. 本产品仅供室内使用，请勿将产品放在高温、阳光直射的地方。
11. 充电时必须保证充电口干燥！请使用原装充电线！

部件名称

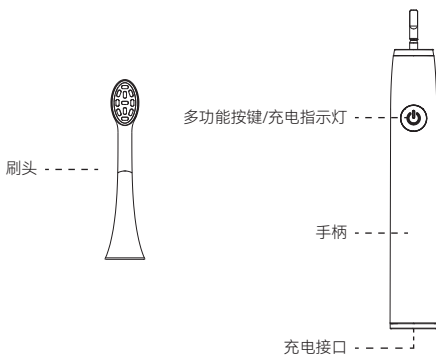

产品信息

型号: SG-567

额定输入功率: 1.2W

额定输入电压: 5V 

充电时间: ≤4小时

公称丝经: 0.127mm 软毛

工作环境: 5-40°C


产地: 中国

执行标准: GB39669 -2020

GB / T40362-2021

合格

刷头更换安装方法

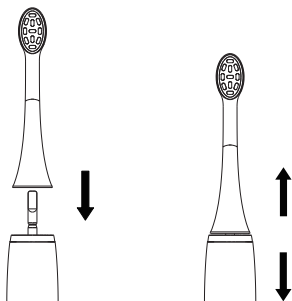

安装：将刷头对准主体上的金属榫头，正向朝下插入；

拆卸：将刷头朝反方向用力即可拔出。

功能特点

1. 每分钟高达31000次的微刷动，清洁口腔。
2. 产品具有两种模式；蓝灯：3-6岁，白灯：6-12岁。
3. 机身符合人体工程学，易于手持，具有防水防滑功能。
4. 牙刷采用安全耐用的锂电池，一次充满电可使用21天左右（按照每天两次每次两分钟计算）。
5. 牙刷自带定时换区提醒、刷牙智能定时及模式记忆功能。
6. 牙刷有缺电提醒功能。
7. 防水等级：IPX7

使用指南

1. 安装刷头，将它完全固定在手柄上，沾湿刷毛并挤上适量的牙膏。
2. 启动产品前将涂有牙膏的电动牙刷放进嘴里。
3. 按动开关，以轻微上下摆动的方式由外及内横向移动牙刷对牙齿的前、后和咀嚼三面各花一定时间。
4. 开启产品后3秒内按开关键可以切换档位，档位切换顺序为：蓝灯→白灯→关闭；3秒内无操作，再次按开关键将关闭产品。
5. 当一个区域刷牙时间达到30秒时，电动牙刷会停顿提醒您移向下一个区域继续清洁，2分钟后自动关闭。

充电说明

1. 当使用结束后发现红色指示灯闪烁或者产品不能被正常开启，此时说明电池电量已经不足，需要对产品进行充电。
2. 用包装内原装的充电线连接牙刷和USB充电器或者有USB接口的设备（如电脑）。
3. 充电至10%电量之前无指示灯，电量为10%-90%指示灯为红色，电量为90%-100%指示灯为绿色。
4. 本产品应仅使用标记在产品铭牌上的特低电压供电，推荐使用移动电源或者使用电脑USB接口充电，在任何情况下的输出功率不超过15W，请避免使用输出电压超过5V的移动电源或者使用电脑USB接口，以免过高电压充电损坏产品。

故障诊断

情况	可能原因	解决措施
震动强度减弱	牙刷强压在牙齿上	将刷头轻轻的放在牙齿上
牙刷工作时间短	1.手柄没有放好，导致充电失败 2.电量不足	1.保证充电时摆放方式正确 2.延长充电时间
牙刷不工作	1.电量不足 2.其他原因	1.请进行充电 2.联系赛嘉客服处理






废弃处理

本产品使用的是锂电池，产品寿命终结，丢弃产品前，请务必取出电池并按当地的废弃物管理条例进行回收或处置。如有疑问，请咨询当地废弃物管理部门。

拆卸电池您需要以下工具：锯子、剪钳。

注意：

仅丢弃产品时拆卸电池。拆卸前请确保电池电量已耗尽，并断开电源。使用工具请遵守基本安全规则并做相应的保护措施，避免受伤。

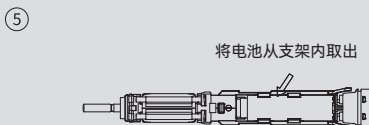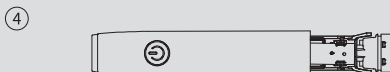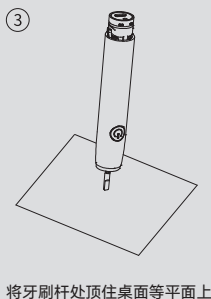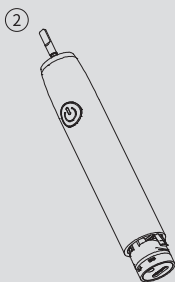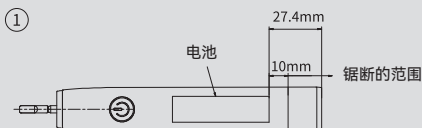

产品有害物质名称及含量

有害物质	部件名称	
	刷头	牙刷手柄
铅(Pb)	○	×
汞(Hg)	○	○
镉(Cd)	○	○
六价铬 (Cr (VI))	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。		
	本表内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。	备注: 1: 有害物质含量超出是因为目前业界没有成熟的替换方案，但是符合欧盟RoHS 指令环保要求。 2: 本公司郑重承诺将在技术上可行的情况下持续推动有害物质减量化及完全替代。

公司名称：宁波赛嘉电器有限公司
公司地址：浙江省宁波市江北区姜湖路239号
电话：4008-843-006

产品保修卡

尊敬的客户，非常感谢您对本公司电动牙刷、冲牙器等系列产品
的关心和支持！同时感谢您选择、购买我们的产品！本公司
承诺，此产品已通过我司严格的质量检验，从购买之日起如
有质量问题，7天内包退、15天内包换、2年内保修。如未按
说明书内容操作或未经本公司授权单位及个人私自拆开或修
理，不属此范围。

以下内容请销售单位协助用户完整填写

用户姓名

购买日期

联系方式

以下内容请销售单位完整填写

产品型号

出厂日期

销售单位名称